

# Contour<sup>®</sup> plus ONE<sup>»</sup>

Blood Glucose  
Monitoring System

# Používanie **Mojich** **charakteristických vzorov** s aplikáciou **CONTOUR®DIABETES**




Zmeny v liečbe, diéte alebo cvičení konzultujte  
vždy vopred s Vaším lekárom.




**Contour**  
**plus ONE**  
Blood Glucose  
Monitoring System

Funkcia **Moje charakteristické vzory** identifikuje špecifické vzory a trendy Vašich meraní hladín glukózy a informuje Vás o ich možných príčinách.

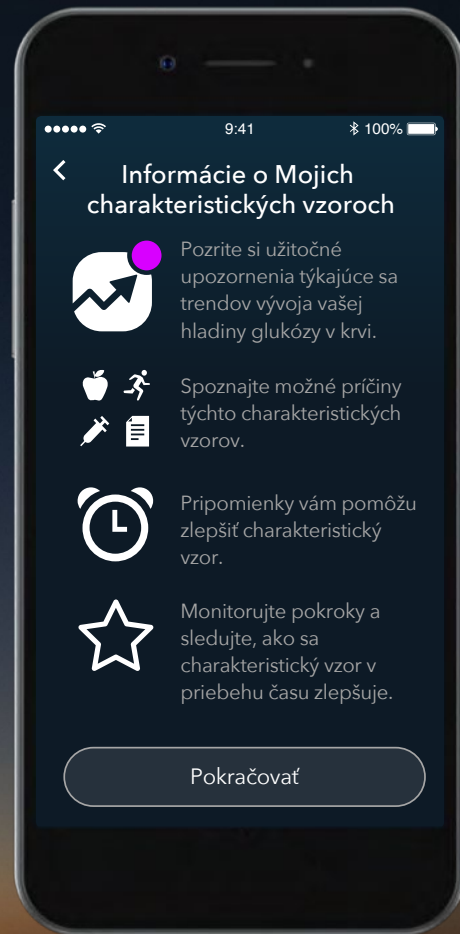

Contour<sup>®</sup>  
plus ONE<sup>»</sup>  
Blood Glucose  
Monitoring System


Funkcia **Moje charakteristické vzory** identifikuje špecifické vzory a trendy Vašich meraní hladín glukózy a informuje Vás o ich možných príčinách.

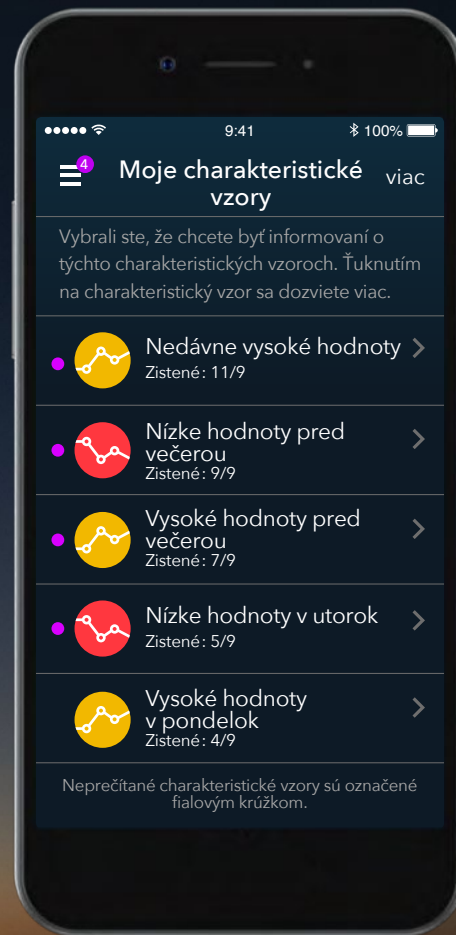

**Contour**  
**plus ONE**  
Blood Glucose  
Monitoring System

# 1. **Moje charakteristické vzory**


Zvoľte **Moje charakteristické vzory** z Hlavnej Ponuky.

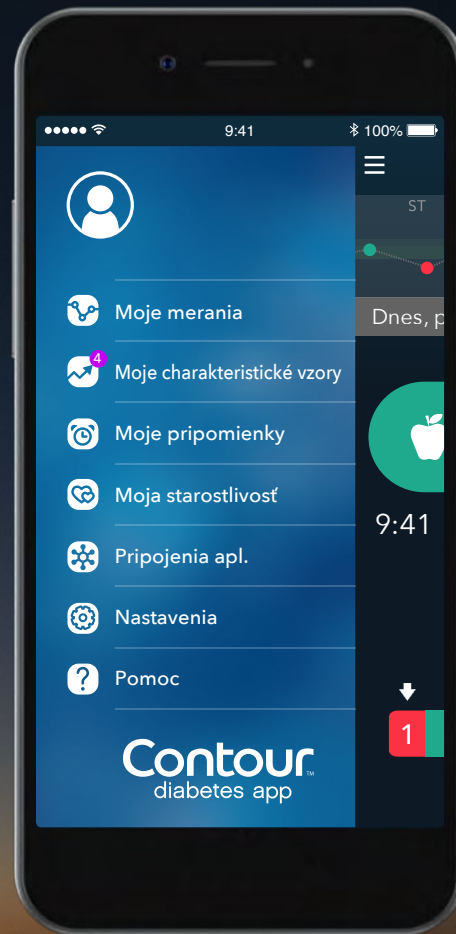

**Contour**  
**plus ONE**  
Blood Glucose  
Monitoring System

## 2. Moje charakteristické vzory


Obrazovka **Moje charakteristické vzory** ukáže charakteristické vzory, s ktorými ste boli oboznámení. Neprečítaný charakteristický vzor je označený fialovým krúžkom.

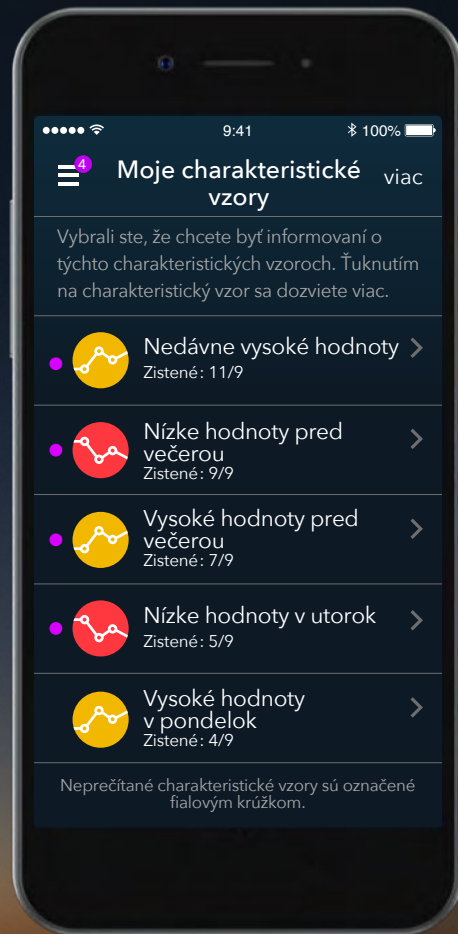

**Contour**  
**plus ONE**  
Blood Glucose  
Monitoring System

## 2. Moje charakteristické vzory


Ťuknite na **Viac**, aby ste zmenili Váš vybraný charakteristický vzor alebo aby ste si prezreli históriu charakteristických vzorov.

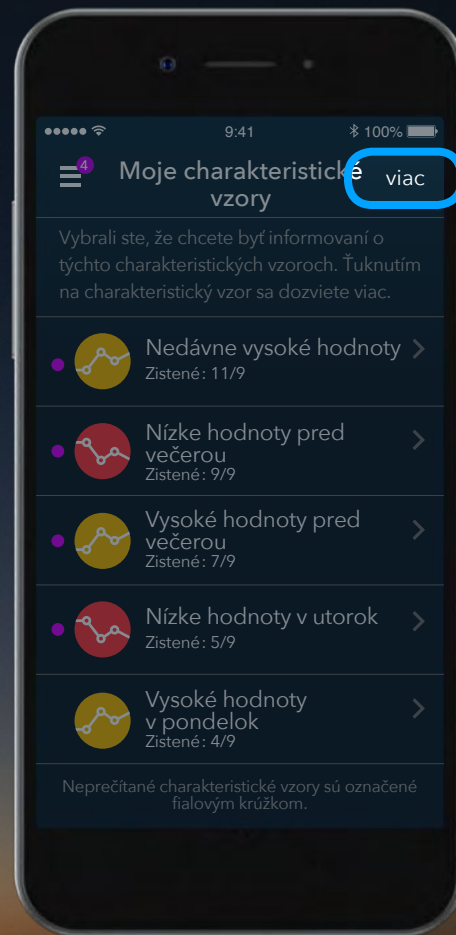

Contour<sup>®</sup>  
plus ONE<sup>»</sup>  
Blood Glucose  
Monitoring System

### 3. **Moje charakteristické vzory**

Ťuknite na **Výber charakteristického vzoru**, aby ste vybrali charakteristické vzory, o ktorých budete oboznámení.

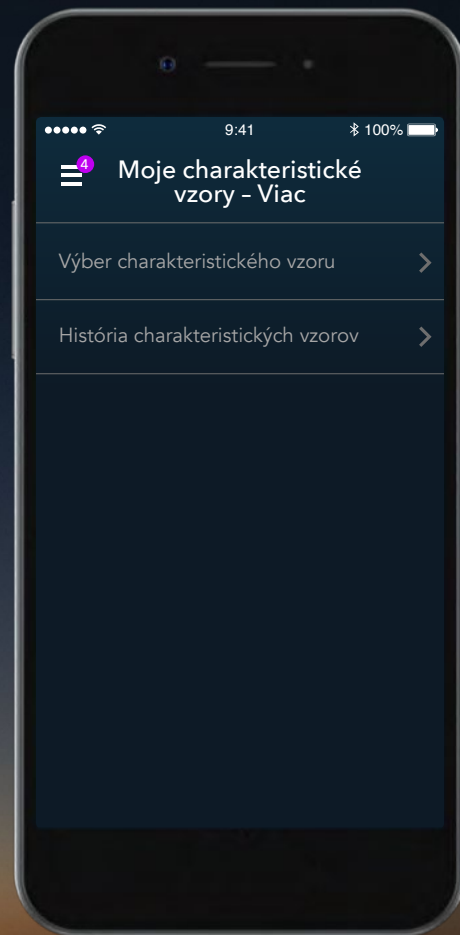


**Contour<sup>®</sup>**  
**plus ONE<sup>»</sup>**  
Blood Glucose  
Monitoring System



### 3. **Moje charakteristické vzory**


Ťuknite na **Výber charakteristického vzoru**, aby ste vybrali charakteristické vzory, o ktorých budete oboznámení.

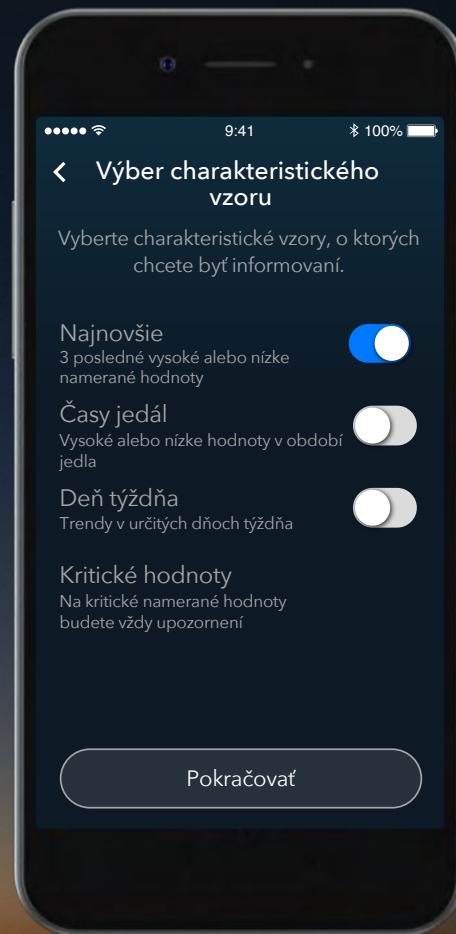

**Contour<sup>®</sup>**  
**plus ONE<sup>»</sup>**  
Blood Glucose  
Monitoring System

### 3. **Moje charakteristické vzory**

Ťuknite na **Výber charakteristického vzoru**, aby ste vybrali charakteristické vzory, o ktorých budete oboznámení.

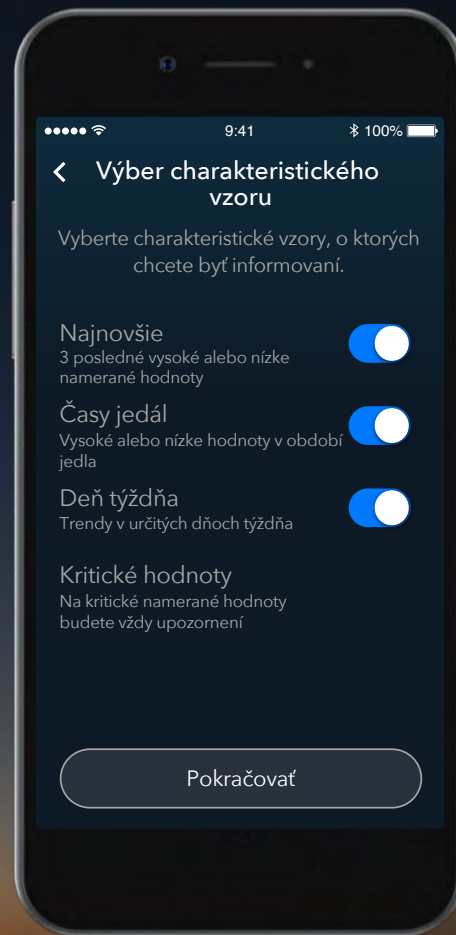


Contour<sup>®</sup>  
plus ONE<sup>»</sup>  
Blood Glucose  
Monitoring System

## 4. Moje charakteristické vzory

Akékoľvek charakteristické vzory, ktoré boli zistené, budú uvedené na obrazovke **Moje charakteristické vzory**.


Obrazovka **Moje charakteristické vzory** ukáže charakteristické vzory, s ktorými ste boli oboznámení. Neprečítaný charakteristický vzor je označený fialovým krúžkom.

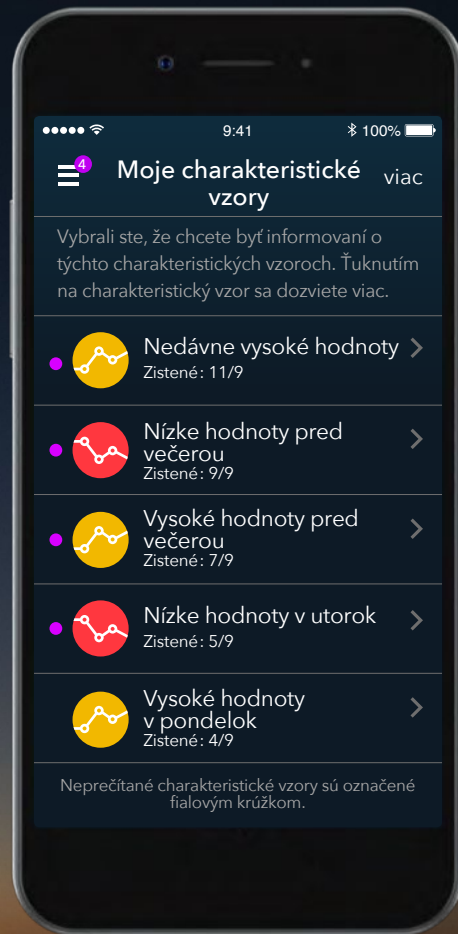

**Contour**  
**plus ONE**  
Blood Glucose  
Monitoring System

## 4. Moje charakteristické vzory


Môžete vidieť detaily charakteristického vzoru, a zistiť viac o možných príčinách.

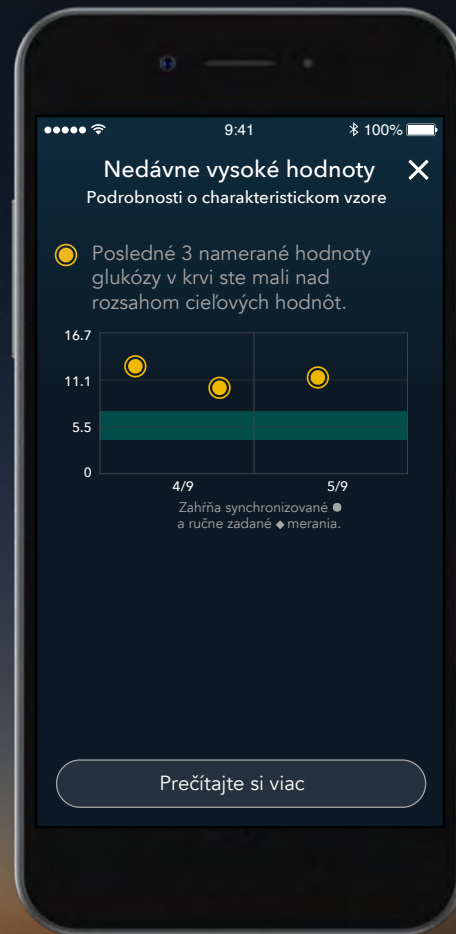

**Contour<sup>®</sup>**  
**plus ONE<sup>»</sup>**  
Blood Glucose  
Monitoring System

## 4. Moje charakteristické vzory


Môžete zistiť viac o tom, čo môže byť príčinou tohto charakteristického vzoru a vybrať si medzi možnými príčinami ako sú jedlo, liečba alebo cvičenie.

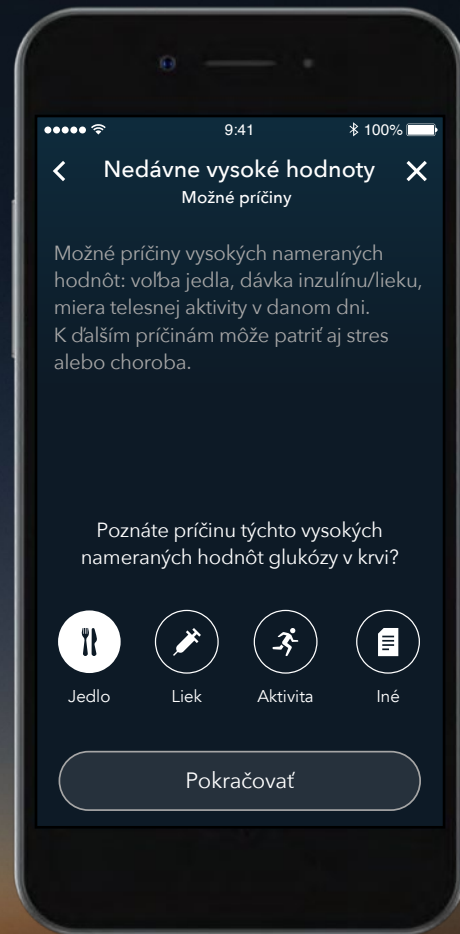

Contour<sup>®</sup>  
plus ONE<sup>»</sup>  
Blood Glucose  
Monitoring System

## 4. Moje charakteristické vzory


Môžete tiež nastaviť pripomienku týkajúcu sa novej príčiny.

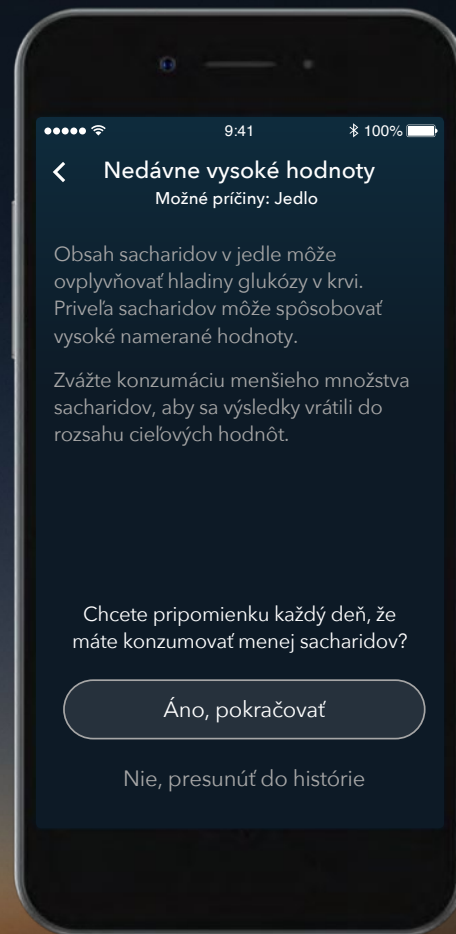

**Contour<sup>®</sup>**  
**plus ONE<sup>»</sup>**  
Blood Glucose  
Monitoring System

## 5. Moje charakteristické vzory


Hocikedy sa môžete vrátiť späť do **Histórie charakteristických vzorov**.

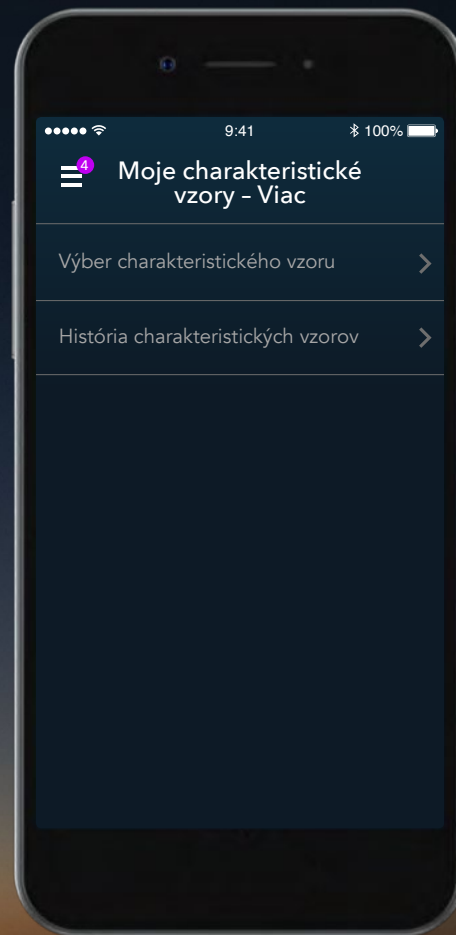

Contour<sup>®</sup>  
plus **ONE**»  
Blood Glucose  
Monitoring System

## 5. Moje charakteristické vzory

V **Histórii charakteristických vzorov** môžete prehliadať charakteristické vzory zistené v minulosti, ktoré už nie sú aktívne.

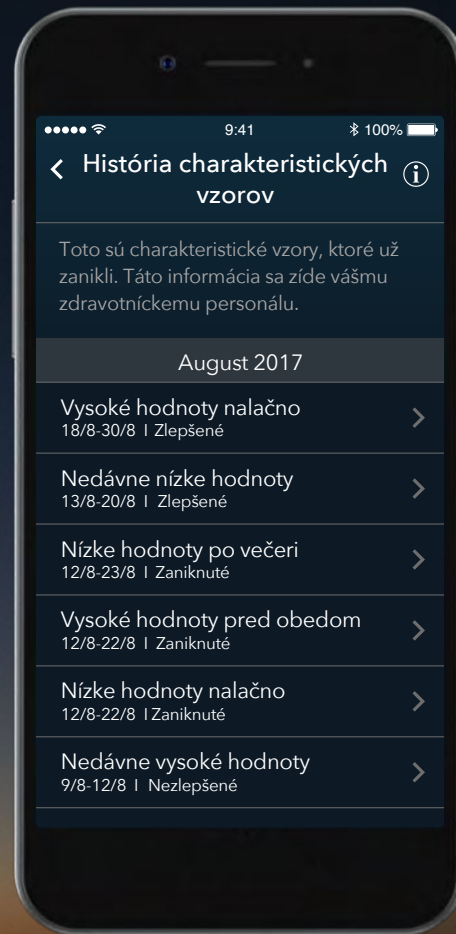


Contour<sup>®</sup>  
plus ONE<sup>»</sup>  
Blood Glucose  
Monitoring System



## 5. Moje charakteristické vzory

V **Histórii charakteristických vzorov** môžete prehliadať charakteristické vzory zistené v minulosti, ktoré už nie sú aktívne.

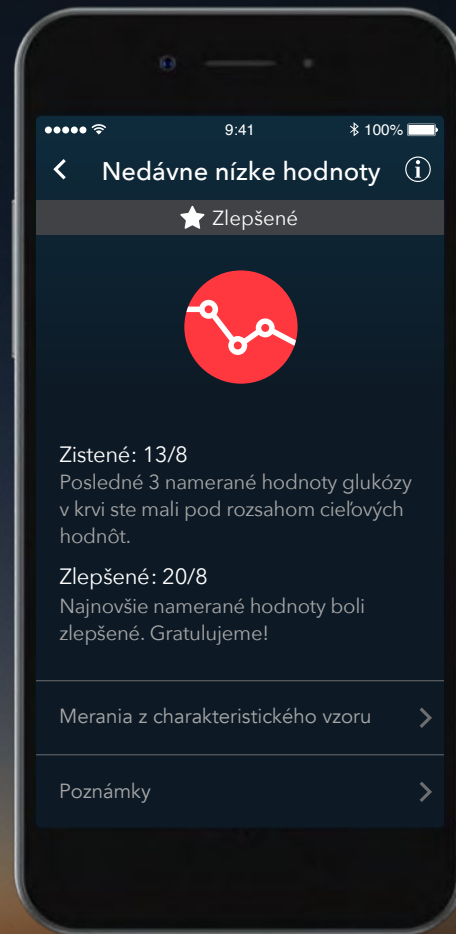

**Contour**  
**plus ONE**  
Blood Glucose  
Monitoring System

Ak máte akékoľvek otázky o inteligentnom glukomere **CONTOUR®PLUS ONE** alebo aplikácii **CONTOUR® DIABETES APP** obráťte sa na Vášho lekára alebo sa riadte pokynmi v používateľskej príručke.

Viac informácií a tiež informáciu, či sú tieto produkty dostupné vo Vašej krajine, nájdete na **diabetes.ascensia.com**.



Hypothetical patient data for demonstration purposes only.  
Always consult with your healthcare provider prior to making changes to treatment, diet or exercise.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks herein is under licence. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc. Ascensia, the Ascensia Diabetes Care logo and Contour are trademarks and/or registered trademarks of Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Date of preparation: February 2018 Code: G.DC.10.2017.52578



**Contour®  
plus ONE**  
Blood Glucose  
Monitoring System

Contour<sup>®</sup>  
diabetes solutions